
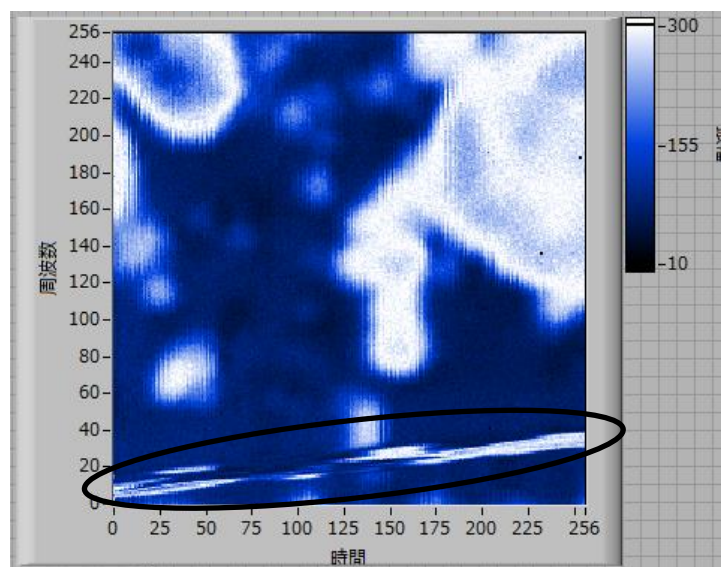


研究報告

B4 小谷

● チューナブルレーザー系

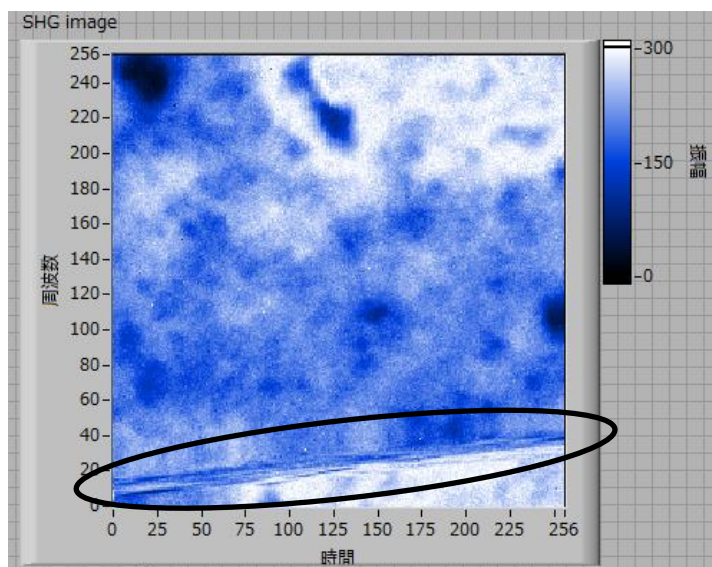

PMT の電源ケーブルが断線していたので修理した。

サンプルにはリチウムパウダーを用いた。上の図はそのときのイメージです。イメージ下部に斜めの線状のものがある。すべてのレンズやガルバノミラーを調整しなおしたが、線状のものはなくならなかった。

皮膚サンプルで測定を試みるも、SHG 光の発生場所を絞り込むことができなかった。パスの調整があまかったと考え、調整しなおす予定です。

今後の予定

線状のものの解決

キャリブレーション